

■仕様

名 称	ステアエイド
型 式	SASW-1
最大積載量	119kg
機 体 質 量	59kg
機 体 寸 法	全長 1,453mm 全幅 644mm 全高 903mm
階段昇降速度	上昇6.1m(約19段)/分 下降10.7m(約34段)/分
一充電使用時間	約30分
バ ッ テ リ ー	小形制御弁式鉛蓄電池12V20Ah 20HR
モーター・出力	永久磁石式直流モーター・公称210W/30分定格
充 電 器	タイマー式オートカット 入力:AC100V 出力:DC12V 5A
T A I S コード	00412-000022

※この仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

名 称	ステアエイド SA-SW専用車いす
型 式	FG18 キャスタ径・車輪径(インチ) 6・22×1 ³ / ₈
最大体 重	100kg シ ー ト 幅 400mm
前 座 高	455mm(座クッション含)
後 座 高	430mm(座クッション含)
アームサポート高	200mm(座クッション有時)
バックサポート高	400mm(座クッション有時)
フ ッ ト 長	360~420mm(座クッション有時)
シ ー ト 奥 行	400mm 全 幅 670mm
全 高	890mm 空 車 質 量 19kg
全 長	1,015mm
大車輪適正空気圧	350kPa(3.5kgf/cm ²)
T A I S コード	00412-000013

その他取り扱い商品

【介護保険レンタル対象品】

J-SEATモデル

階段移動用リフト



狭い路り場がある
階段にお住いの方に
(コンパクトなシートタイプ)

J-MAX & J-COMPACT

階段昇降ユニット

専用車いす



階段昇降後、着脱式の
車いすで移動ができます。
デイサービスの送迎に便利

STAIR CHAIR

可搬型階段昇降機



高齢者施設・病院・集合住宅など。
緊急時の備えや、
バリアフリー化支援として

お気軽にお問い合わせください。

JQA-1978 狭山工場

夢のあるユニークなアイデア製品を作り出す

株式会社サンワ <http://www.sunwa-jp.co.jp/>
e-mail:sangyo@sunwa-jp.co.jp

□本 社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-5
TEL:本社営業部(狭山工場)へご連絡ください

□本 社 営 業 部 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571
TEL:04-2954-6611 FAX:04-2954-6617

□西日本営業所 〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区横2-126
TEL:079-231-1005 FAX:079-231-1006

【代理店】



カタログにはユニバーサルデザインフォントを使用しています。

ユニバーサルデザインフォントとは、目の不自由な人も含め、年齢、性別関係なく、
より多くの人を読みやすく、誤読されにくいように考慮した書体です。

2021.08.3000

カタログ管理番号 F24-03

— 可搬型階段昇降機 —

STAIR AID

ステアエイド

介護保険
レンタル
対象品



Sunwa

階段の昇り降りを安心・安全に移送します。

専用車いすに乗ったまま階段の昇降ができるサンワの「ステアエイド」。

建物や階段への設置工事は必要なく、可搬型なのでいろいろな場所で利用ができます。

サンワの長きに渡る技術開発から生まれた特殊設計のゴムクローラーが、

階段の段鼻を確実にグリップ。昇降スイッチを押しているだけで安定して階段を昇降し、

スイッチから指を離せば階段上でも確実に停止が可能です。

「ステアエイド」は、すべての人が不自由なく、人生をより豊かにするために安心・安全に移送します。

ステアエイドの取り付け方法

ステアエイドと車いすは簡単に脱着することが可能です。



▲ステアエイドの詳細は、QRコードより取扱説明動画をご覧ください。



階段上下避難



バッテリー駆動


ステアエイドが選ばれる

5つのポイント

★★★★★
FIVE POINTS

POINT 1

特殊設計のゴムクローラーが階段の段鼻を確実にグリップ

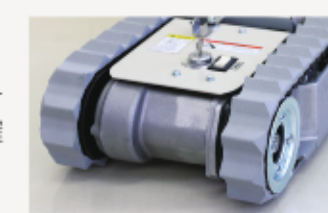

POINT 2

スイッチから指を離せば電磁ブレーキが働き、階段上でも安全に停止します。



POINT 3

車いすの固定は2重ロック機構



POINT 4

階段昇降はスイッチを押すだけ。モーター駆動のため大きな力は不要



POINT 5

充電器は過充電防止付オートカット式



■介護保険レンタルでご利用の場合

・操作者の条件

年齢：原則16才以上70才以下であること
 病歴：発作性の病気を持っていないこと
 身長：原則150cm以上
 体重：原則45kg以上
 平衡感覚：階段を後ろ向きに上がることができる
 四肢の状況：階段を後ろ向きに上がることができる
 聴覚・視覚：特に聴覚・視覚に問題がないこと

・その他

利用者の条件：特になし
 講習の概要：操作講習は貸与事業者が行いますが、受講できる方に条件があります。

■使用環境の条件

階段傾斜角度：35度以下
 段鼻間ピッチ：340mm以下
 段鼻R：R9mm以下
 蹴上寸法：190mm以下

※らせん階段・曲がり階段でないこと
 ※段鼻に欠けがないこと
 ※滑り止めモールがあった場合、確実に固定されていること
 ※濡れて滑りやすい状態や油脂が付着・凍結した階段では使用しないこと

本製品は、操作講習を受けていない方は操作できません。



【ステアエイドSA-SW】

【ステアエイドSA-SW専用車いすFG18】

■許容階段寸法(単位:mm)

